



**TOUCHBeauty**

TB-1696A


---

**LED Treatment Yellow**

LED トリートメント イエロー

---

**取扱説明書**

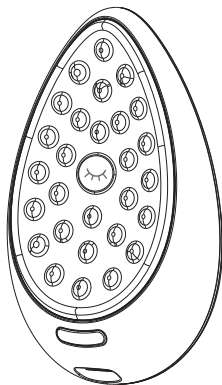

このたびは、TOUCHBeauty 製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- |     |   |
|-----|---|
| ⚠危険 | 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じるものを示しています。     |
| ⚠警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるものを示しています。         |
| ⚠注意 | 誤った取扱いをしたときに、軽症を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるものを示しています。 |

### 記号の例

⊘禁止 「してはいけないこと」を示しています。

❶指示 「必ずすること」を示しています。

### ⚠危険

- |   |   |
|---|---|
| ⊘ | <ul style="list-style-type: none"><li>● 下記のような電子機器をお使いの方は絶対に使用しない。<ul style="list-style-type: none"><li>・ペースメーカーなどの体内植込み型医療用電子機器</li><li>・人工心肺などの生命維持用医療用電子機器</li><li>・心電計や点滴器などの装着型の医療用電子機器<br/>(医療用電子機器や家庭用電気治療機器の誤作動、事故や体調不良をまねく恐れがあります)</li></ul></li></ul> |
|---|---|

### ⚠警告

- |   |  |
|---|--|
| ⊘ | <ul style="list-style-type: none"><li>● 次のような方は使用しない。<ul style="list-style-type: none"><li>・光の点滅に反応するてんかん発作の人</li><li>・顔面の神経障害のある人</li><li>・急性疾患の人</li><li>・感染症疾患の人</li><li>・顔面黒皮症の人</li><li>・心臓疾患の人</li><li>・特に肌が敏感な人</li><li>・生理中、妊娠中および産後1ヶ月の人</li><li>・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人</li><li>・アレルギー体質の人</li><li>・体調がすぐれない人</li><li>・疲労が激しい人</li><li>・飲酒や薬を服用中の場合</li></ul></li><li>● 事故やトラブルの恐れがあります。</li><li>● 下記の部位には使用しない。<ul style="list-style-type: none"><li>・眼球、口の中</li><li>・かゆみやほてり、病的なシミのある部位</li><li>・当日の脱毛や除毛処理をした部位</li><li>・過度の日焼けで炎症を起こしている部位</li><li>・肌に傷や湿しん、はれものなどがある部位</li><li>・傷口</li><li>・ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位</li><li>・整形手術をした部位</li></ul></li><li>● 事故やトラブルの恐れがあります。</li><li>● 本体を高いところから落としたり、故意に踏んだり、たいたたり、強い力を加えない。<br/>故障・感電・発火・けがの原因となります。</li><li>● 引火性のもの（アルコール、スプレー、除光液など）の近くで使用しない。<br/>火災・やけどの原因となります。</li></ul> |
|---|--|

### ⚠警告

- 本体、ACアダプターを水につけたり、水をかけたりしない。  
ショート・感電の原因となります。
- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。  
感電・けがの原因となります。
- 浴室や湿気の多いところで使用したり、保管しない。  
火災・感電の原因となります。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。  
ショート・感電・発火の原因となります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。  
発熱による火災の原因となります。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。  
感電・けがの原因となります。
- 改造・修理はしない。  
火災・感電・けがの原因となります。

### ⚠警告

- 次のような方は、医師に相談のうえ、使用する。
  - ・今までに重い病気をした人
  - ・悪性腫瘍のある人
  - ・ステロイド系ホルモン剤を長期間使用している人
- 肌の同じ箇所続けて使用しないで動かしながら使用する。  
皮膚を痛める原因となります。
- 本製品を使用するときは、付属の保護メガネを着用する。  
保護メガネを着用していても、必ず目を閉じて照射する。  
事故やトラブルの恐れがあります。
- 使用時間や頻度は、取扱説明書の指示を守ってください。  
(過度な使用は、体に危害を与える原因となることがあります)
- 使用中に痛みや不調を感じたときや、使用後に肌に異常を感じたときは、  
使用を中止して専門医に相談する。  
事故・体調不良の原因となります。
- 異常、故障時には、直ちに使用を中止する。  
火災・感電・けがの原因となります。  
【異常・故障の例】本体、ACアダプター、コードが以下の状態になったとき。  
変形、異常に熱くなる、こげ臭いにおいがする、使用中に異音が出る。  
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。
- 必ずAC100-240Vで使用する。
- ACアダプターやUSB充電コードは、根元まで確実に差し込む。  
火災・感電の原因となります。
- 本体のお手入れをする際は、必ず電源をオフにする。  
感電・けがの原因となります。


### ⚠ 注意

- 顔、身体のお手入れ以外の目的で使用しない。  
事故やトラブルにつながる恐れがあります。
- 手に水分（化粧水・美容液・ジェルなど）がついたまま使用しない。  
故障・けがの原因となります。
- 本来の使用方法以外の目的・用途に使用したり、人間以外に使用しない。  
取扱説明書の内容以外に使用したときは、けがや故障の原因となります。
- 本体の LED ライト部分を他の機器や電化製品に接触させない。  
故障・けが・ほかの機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

### ⚠ 注意

- 使用する前に、本体、LED ライトに傷がないか確認する。  
けがの原因となります。
- 充電時以外は、AC アダプターをコンセントから抜く。  
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
- 初めて使用するときはテストを行ってから使用する。
- 使いはじめの方や敏感肌の方は使用時間を短めにして、お肌の様子を見ながら使用する。
- 肌荒れなどのトラブルの原因となります。
- イヤリング、ピアス、ネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズ、メガネは外して使用する。  
事故やトラブルの原因となります。


## 各部のなまえ

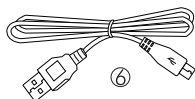

⑥



⑦

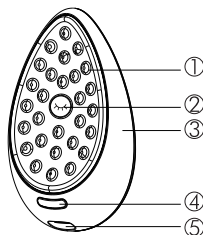

- ① LED ライト
- ② 充電ランプ
- ③ 本体
- ④ 電源ボタン
- ⑤ ソケット
- ⑥ USB 充電ケーブル
- ⑦ 保護メガネ

## 仕様

商品名	LED Treatment Yellow (LED トリートメント イエロー)
サイズ	約 104 (H) × 66 (W) × 33 (D) mm
質量	約 95g (本体のみ)
電源	充電式 (リチウムイオン電池)
充電時間	約 3 時間
稼動時間	約 1.5 時間
定格電圧	3.7V
定格出力	1.85W
付属品	AC アダプター、USB 充電ケーブル、保護メガネ、取扱説明書 (本書)、保証書

## 使いかた

### ● 充電する

- ・本製品を初めて使用する場合や、長期間使用しなかった場合は、約 3 時間充電してください。
- ・充電は必ず交流 100-240V で、付属の AC アダプターを使用してください。
- ・充電するときは電源をオフにしてください。

1. 本体のソケットに USB 充電ケーブルを差し込みます。
2. USB 充電ケーブルを AC アダプターと接続させ、コンセントに差し込みます。
3. 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。  
充電が完了すると青色に点灯します。
4. 充電完了後、コンセントから AC アダプターを抜き、  
本体ソケットから USB 充電ケーブルを取り外します。

バッテリー残量低下アラーム；

バッテリーの残量が少なくなると、充電ランプが赤く点滅 (約 10 回) して自動的に停止します。

停止後に充電してください。

### ● 使用する前に

1. 使用する前に洗顔を行い、メイクや皮脂などの汚れを落とします。
2. 洗顔後のお肌に化粧水や美容液等を塗布します。
3. お肌にニキビや吹出物で炎症を起こしていたり、異常がないか確認します。  
炎症や異常がある場合は絶対に使用しないでください。

## ● 使用する

### ⚠ 注意



- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・浴室や湿度の高い場所で使用しないでください。
- ・サウナなどの高温になる場所で使用しないでください。
- ・LED ライトは直視しないでください。
- ・LED ライトは肌に直接あてないでください。

## 1. 保護メガネを着用する

### 2. 電源を入れる。

電源ボタンを約 3 秒長押しすると、電源が入ります。

- ・ピッと動作確認音が鳴ります。
- ・電源を入れると、赤色 LED が発光します。

### 3.LED ライトの切替

その後、電源ボタンを押すと黄色 LED が発光します。

- ・電源ボタンを押すと、LED ライトの切替ができます
- ・LED ライトの切替時にもピピッと動作確認音がなります。

赤色 LED : 630nm (点灯)

黄色 LED : 590nm (点滅)

### 4.LED ライトの照射

LED ライトをお肌から 5cm ぐらい離して照射します。

※必ず、目を閉じてください。

照射時間：1 回約 12 分（オートタイマーで自動停止します）

お顔を 5 箇所に分けて、1 箇所 2 分を目安にして、最後は気になる部分に照射します。  
約 2 分毎に「ピピッ」とお知らせアラームが鳴ります。



### 5. 使用中の動作停止。

電源ボタンを約 3 秒長押しすると電源が切れます。

## 使用後のお手入れ、保管

- 必ず電源が切れていることを確認してください。
- 本体の汚れをきれいに拭き取ります。  
やわらかい布かティッシュなどを使用してください。  
※ご注意
  - 本製品は防水仕様ではないため、水洗いはできません。
  - 洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは絶対に使用しないでください。
- お手入れをしたあと、以下の場所に保管してください。
  - お子様の手の届かないところ
  - 湿気やほこりの少ないところ
  - 直射日光の当たらないところ

## 故障かなと思ったら

症状	確認事項	対応策
充電が できない	USB 充電ケーブルが本体のソケット、 または AC アダプターに正しく差 し込まれていますか？	USB 充電ケーブルを確実に差 し込んでください。
	AC アダプターがコンセントから 抜けていませんか？	AC アダプターをコンセントに 確実に差し込んでください。
電源が入 らない	充電できていますか？	約 3 時間充電してください。

## よくあるご質問

### Q1 LED ライトに美容効果があるのですか？

LED (Light Emitting Diode) は、一般的に照明器具として使用されていますが、特定の波長を選んで発光させると、光の波長によりお肌に継続的に照射することで目的にあったトリートメントが行えます。

- 赤色 LED (630nm)：お肌にハリとツヤを与えます。
- 黄色 LED (590nm)：お肌を滑らかにします。

### Q2 LED ライトを直接見ても大丈夫ですか？

ごくわずかな時間であれば直接見ても害はありませんが、一時的に視界が暗く見えたり、チカチカして見えることがあります。

意図的に LED ライトを直接見たり、長時間直視しないでください。

尚、ご使用の際は必ず保護メガネを着用してください。

保護メガネを着用していても、使用中は目を閉じてください。

### Q3 毎日使っても良いですか？

毎日ご使用いただけます。

毎日継続して使用することで、より効果が期待できます。

ご使用時は、必ず保護メガネを着用して目を閉じてください。

#### Q4 1回にどのくらいの時間使えばいいですか？

1回の使用時間は、以下を基準に使用してください。

赤色 LED：約 12 分

黄色 LED：約 12 分

上記の時間にオートタイマーで自動停止します。

#### Q5 お風呂で使ってもいいですか？

本製品は防水仕様ではないため、お風呂や湿気の多いところで使用しないでください。

## アフターサービスについて

### 1. 保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 2. 修理を依頼されるとき

#### ●保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

#### ●保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

### 3. 廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、処分を行ってください。

### 4. お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。